

TREVIOLUX

Den effektiva 3-i-1-lösningen för modern fotodynamisk terapi (PDT).

Produktöversikt


Med den certifierade PDT-lampan TREVIOLUX kan du välja mellan konventionell fotodynamisk terapi, lågsmärta Compact Daylight PDT eller hudföryngring. Tre behandlingslägen i en enda kompakt enhet. Att skapa rätt behandling är nu snabbare och enklare än någonsin.

Våra enheter integrerar banbrytande teknologier för att leverera exceptionell vård, exakta behandlingar och en överlägsen patientupplevelse. Dessa tekniker exemplifierar vårt engagemang för innovation och excellens.



Egenskaper

- 1.** Ställ in behandlingspositionen med den flexibla armen. De tre behandlingssegmenten kan vinklas
- 2.** Använd standard-förinställda behandlingarna eller justera fritt dos och ljuseffekt via pekskärmen.
- 3.** Högpresterande lysdioder är designade för över 65000 h användning. Homogen och justerbar effekt säkerställs.

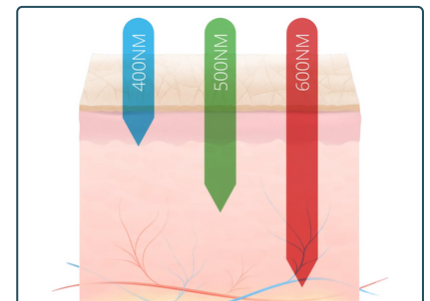

3-i-1 | Enkel att använda | Fullt justerbar | Hög mobilitet | Högpresterand lysdioder | Stort behandlingsområde | Kvalitativa material | Soft-start | Pulse-mode



Vi lämnar upp till 10 års garanti på denna maskin när regelbundet underhåll och service genomförs!

För frågor om våra produkter, serviceärenden eller om MEDlight i sin helhet, tveka inte att kontakta oss!
www.medlight.nu | Tel: 077-12 13 000 | info@medlight.nu

3-i-1

TREVIOLUX kombinerar tre lösningar i en enda enhet. Klassisk PDT, Compact-Daylight-PDT och Föryngring.

Mobil

Den mobila och kompakta designen erbjuder flera fördelar för alla typer av kliniker, såsom förbättrad tillgänglighet för patienter med funktionshinder och enkel integration i befintliga miljöer.

Högpresterande lysdioder

Vi använder den senaste generationen av högpresterande lysdioder (max. 135 000 LUX) för att minska energiförbrukningen samtidigt som vi är säkra och pålitliga.

Patientfokuserad

Från vår praktiskt taget smärtfria Compact-Daylight-PDT och Soft-Start-funktion till Pulse-Mode, förbättrar vi patientupplevelsen.

Specifikationer

Spektrum	630 nm toppvåglängd
Behandlingsyta / Behandlingsavstånd	250mm x 120mm (300cm ²) / 15 cm
Kraft	
Volt	100V - 240V, 47Hz - 63HZ
Energiförbrukning	145VA / 181W
Dimensioner	
Höjd	102 cm - 182cm (justerbar)
Fot	Ø 65cm
Vikt	12,5 kg
Egenskaper	
Behandlingsmetoder	• PDT • Compact-Daylight PDT • Föryngring
Smärthantering	Soft-Start, Pulse Mode
Hantering	Touchscreen
Gränssnitt	Anpassningsbara snabba åtgärder
Mobilitet	Integrerade hjul
Fullt justerbar	• Behandlingssegment kan vinklas till formen på målområdet • Exakt ljusutgångskonfiguration • Pneumatisk höjjustering • Flexibel behandlingsarm för att komma i valfri position



Vi lämnar upp till 10 års garanti på denna maskin när regelbundet underhåll och service genomförs!

För frågor om våra produkter, serviceärenden eller om MEDlight i sin helhet, tveka inte att kontakta oss!

www.medlight.nu | Tel: 077-12 13 000 | info@medlight.nu